



# **FLOW**

**Uživatelský manuál**

Vážený zákazníku,

děkujeme za zakoupení sonického kartáčku Oclean Flow. Před prvním použitím si prosím pozorně přečtete návod k použití a dodržujte bezpečnostní pokyny. Uschovejte si tento manuál pro budoucí potřebu, abyste předešli nesprávnému použití výrobku. Pokud budete potřebovat detailnější informace, obraťte se prosím na prodejce, nebo distributora produktu.

Distributor: BELdental s.r.o., Mojmírovců 799/45, 709 00 Ostrava-Mariánské Hory, ČR  
tel: + 420 596 638 223, email: obchod@beldental.cz


## Důležité bezpečnostní pokyny

- Vzhledem k vysokorychlostním vibracím je normální, že při prvním použití zubního kartáčku pocítíte brnění. Tento pocit postupně odezní po 7 až 14 dnech.
- Pokud zubní kartáček delší dobu nepoužíváte, baterie se vybije kvůli spotřebě energie v pohotovostním režimu. To lze vyřešit nabíjením, ale indikátor nabíjení na kartáčku se nerozsvítí okamžitě. Vyčkejte cca 6 až 10 minut, než se zubní kartáček opět zapne a bude zobrazovat stav nabíjení.
- Je normální, že se zubní kartáček při nabíjení zahřívá. Pokud se zubní kartáček extrémně zahřeje, okamžitě přestaňte nabíjet a/nebo jej vypněte a zašlete jej ke kontrole do autorizovaného zákaznického servisu společnosti Oclean.
- Používejte pouze s originálními hlavicemi Oclean. Výrobce nenese odpovědnost za škody způsobené použitím hlavic jiných značek.
- Zubní kartáček je určen pouze k čištění ústní dutiny. Nepoužívejte jej k jiným účelům.
- Zubní kartáček je prostředek osobní péče. Výměnné hlavice nesdílejte s jinou osobou.
- Zubní kartáček skladujte na čistém a suchém místě mimo dosah přímého slunečního záření.

## Upozornění

- Nedoporučuje se tento kartáček používat osobami, které podstoupily nebo podstupují léčbu parodontální chirurgie, mají zubní náhradu, krvácející dásně, citlivou a náchylnou ústní dutinou nebo se léčí s jiným onemocněním ústní dutiny. Tyto osoby by se měly předem poradit se zubním lékařem.
- Tento zubní kartáček není vhodný pro osoby se sníženými duševními a fyzickými schopnostmi a pro děti mladší 12 let.
- Vypněte napájení, když je nabíjecí základna nabitá nebo před čištěním.
- Pravidelně čistěte suchým hadříkem, abyste zabránili hromadění prachu a nečistot, které mohou snížit nabíjecí účinek.

## Popis produktu

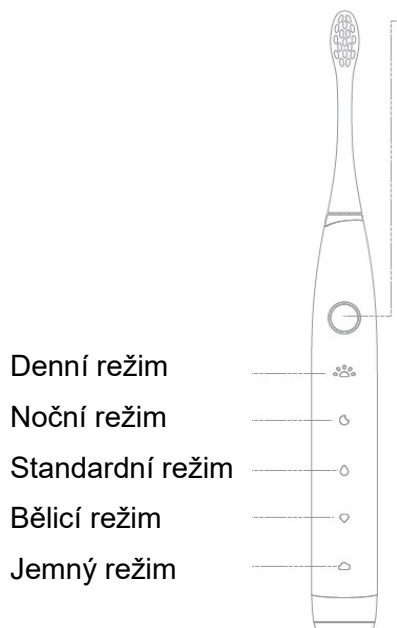

### Tlačítko zapnutí/vypnutí

Zapnutí: krátkým stisknutím tlačítka

### Přepínání režimů:

Krátkým stisknutím tlačítka do 5 s přepínáte režimy. Bílý indikátor bliká.

### Vypnutí:

1. Opětovným stisknutím tlačítka v jemném režimu přístroj vypněte.
2. Stisknutím tlačítka po 5 s v průběhu režimu.
3. Zařízení se automaticky vypne po 2 minutách provozu.

### Nízký stav baterie:

Pokud je úroveň nabití baterie nižší než 10%, bliká červená kontrolka.

## Návod k použití

Režimy čištění:

**Denní režim:** Nižší intenzita. Účinně odstraní plak nahromaděný během spánku.

**Noční režim:** Hlubkové čištění vyšší intenzitou po celém dni.

**Standardní režim:** Běžné čištění.

**Bělicí režim:** Efektivně odstraní plak a skvrny např. od kávy a čaje.

**Jemný režim:** Šetrné čištění citlivých zubů a dásní.

### Nabíjení

Před prvním použitím zařízení nabijte.

Tento výrobek využívá nabíjecí mechanismus typu USB-C. V případě potřeby nabíjení sejměte ochranný kryt ve spodní části a zasuňte nabíjecí kabel typu USB-C do portu a nabíjejte. Po úplném nabití nabíjecí kabel odpojte a důkladně zavřete kryt ve spodní části.


Během napájení bliká bílá LED kontrolka.

Nízký stav baterie: Pokud bude baterie nabitá pod 10%, LED kontrolka bude blikat červeně.

K nabíjení použijte nabíječku USB 5V/1A nebo 5V/2A mobilního telefonu (například nabíječka pro iPhone, nabíječka pro tablet atd.). Pokud je nabíjecí proud menší než 1A, může se doba nabíjení prodloužit. Pokud je napětí nabíječky vyšší než 5V, může dojít k poškození nabíjecího obvodu.

V případě potíží přístroj nerozebírejte a vestavěnou baterii neopravujte. V případě poškození se obraťte na autorizovaný servis.

## Doporučená technika čištění zubů

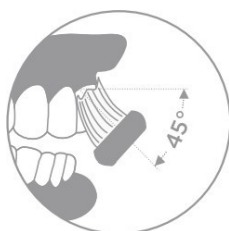

Pro správné čištění zubů pohybujte štětinami pomalu pod úhlem 45° k linii dásní.




Držte jemně rukojeť zubního kartáčku a pomalu s ní pohybujte krouživými pohyby. Netlačte příliš silně.



Po čištění vypláchněte ústní dutinu čistou vodou.

## Čištění a údržba:

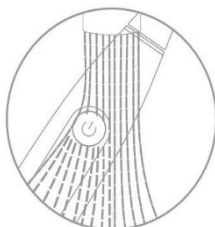

Po každém použití kartáček opláchněte pod tekoucí vodou a nechte ho vysušit přirozeně na vzduchu. Netahejte za štětiny kartáčku, aby nedošlo k jejich deformaci.

## Technické údaje

<b>Název produktu</b>	Sonický zubní kartáček Oclean
<b>Model</b>	F5002
<b>Vodotěsné</b>	IPX7
<b>Napájení</b>	1.85W
<b>Nabíječka</b>	Nabíječka USB-C
<b>Vstup</b>	5V =1A
<b>Výdrž baterie*</b>	≤ 180 dní
<b>Kapacita baterie**</b>	2500 mAh
<b>Doba nabíjení*** Standard</b>	≤ 5 hodin Q/SZYD 1-2021

\* Při čištění dvakrát denně po dobu 2 min

\*\* Baterie má toleranci  $\pm 50$  mAh

\*\*\* Při použití adaptéru do mobilního telefonu 5V/1A

## Záruční podmínky

Na nový výrobek se vztahuje záruka 2 roky. V případě potřeby opravy nebo jiného servisu v záruční době se obraťte přímo na prodejce výrobku, je nutné předložit originální doklad o koupi s datem nákupu.

**Za rozpor se záručními podmínkami, pro který nelze reklamaci uznat, se považují následující skutečnosti:**

- Používání výrobku k jinému účelu, než pro který je výrobek určen, nebo nedodržování pokynů pro údržbu, provoz a servis výrobku.
- Poškození výrobku živelnou pohromou, zásahem neoprávněné osoby nebo mechanicky vinou kupujícího (např. při přepravě, čištění nevhodnými prostředky apod.).
- Přirozené opotřebení a stárnutí spotřebního materiálu nebo součástí během používání (např. baterií atd.).
- Působení nepříznivých vnějších vlivů, jako je sluneční záření a jiné záření nebo elektromagnetické pole, vniknutí kapaliny, vniknutí předmětu, přepětí v síti, elektrostatický výboj (včetně blesku), vadné napájecí nebo vstupní napětí a nevhodná polarita tohoto napětí, chemické procesy, např. použité zdroje atd.
- Pokud někdo provedl úpravy, modifikace, změny konstrukce nebo adaptace za účelem změny nebo rozšíření funkcí výrobku oproti zakoupené konstrukci nebo použití neoriginálních součástí.

## Informace pro uživatele k likvidaci elektrických a elektronických zařízení (domácnosti)

Tento výrobek nesmí být likvidován jako běžný komunální odpad v souladu se směrnicí EU o odpadních elektrických a elektronických zařízeních (WEEE - 2012/19 / EU). Ke správné likvidaci odevzdejte použité akumulátory a baterie na určená sběrná místa elektronického odpadu. Správnou likvidaci tohoto výrobku, pomůžete předejít možným negativním dopadům na životní prostředí a lidské zdraví, které by jinak mohly být způsobeny nevhodným nakládáním s odpadem z tohoto výrobku. Další informace získáte na místním úřadě nebo na nejbližším sběrném místě.



## EU prohlášení o shodě

### Identifikační údaje zplnomocněného zástupce výrobce/dovozce:

Distributor:

BELdental, s.r.o.

Sídlo společnosti: Mojmírovců 799/45, 709 00 Ostrava-Mariánské Hory, Česká republika

IČ: 28570219

Dovozce: UAB Mbrush Krokuvos 13, Vilnius, Litva

### Předmět prohlášení:

Název: Sonický zubní kartáček Oclean Flow

Mode: F5002

**Výše uvedený výrobek byl testován v souladu s normami použitými k prokázání shody se základními požadavky stanovenými ve směrnicích:**

Směrnice č. 2014/30/EU

Směrnice č. 2014/35/EU

Směrnice č. 2011/65/EU ve znění 2015/863/EU

