



POUŽÍVATEĽSKÁ PRÍRUČKA

SLOVENSKY

**MB4**  
MASÁŽNY PRÍSTROJ

## O NÁS

Spoločnosť MISURA podporuje zdravý životný štýl prostredníctvom kvalitných výrobkov, a tým zvyšuje životnú úroveň svojich používateľov.

Cvičenie a športová aktivita nepochybne prispievajú k našej fyzickej a duševnej pohode. Po fyzickom cvičení by mala nasledovať aj relaxácia a dôkladné uvoľnenie namáhaných svalov. V dnešnej uponáhľanej dobe na to niekedy nie je čas a výsledkom môže byť nadmerná svalová únava, napätie a niekedy aj nepríjemná bolesť.

MISURA prináša riešenie v podobe masážneho prístroja MISURA MB4. Je to ručné masážne zariadenie, ktoré aplikuje koncentrované tlakové impulzy hlboko do svalového tkaniva. Tieto tlakové impulzy odstraňujú svalové uzly, pomáhajú uvoľniť svaly, zlepšujú krvný obeh a rýchlo zvyšujú rozsah pohybu. Správne používanie masážneho prístroja môže rýchlo skrátiť čas regenerácie po cvičení a zároveň znížiť svalové napätie a prípadnú bolesť.

**MISURA – RIEŠENIE NA MIERU!**

## O PRODUKTE

Masážny prístroj MISURA bol navrhnutý a vyvinutý v spolupráci s tímom fyzioterapeutov, spinálnych terapeutov a profesori ergonómie. Na testovanie výrobku boli pozvaní aj profesionálni športovci. Jedinečné funkcie a vlastnosti výrobku sa neustále testujú, aby sa dosiahol optimálny výkon zariadenia, ktoré zákazníkom poskytuje najúčinnjšiu formu regenerácie svalov a profesionálny zážitok z masáže.

Masážny prístroj MISURA MB4 využíva pulzujúce vibrácie, ktoré pomáhajú zvýšiť celkovú výkonnosť tela. Ručný masážny prístroj je vyrobený z vysokokvalitných komponentov, ktoré poskytujú správne množstvo vibrácií.

Ručný masážny prístroj je vhodný pre všetky vekové skupiny. Je ideálny na zlepšenie celkovej telesnej výkonnosti, urýchlenie regenerácie, zvýšenie rozsahu pohybu, pohodlia, a tým aj na zlepšenie celkovej pohody.


## OBSAH

KONŠTRUKCIA .....	1
VLASTNOSTI .....	2
FUNKCIE .....	3
VÝHODY.....	4
JEDNODUCHÁ OBSLUHA .....	8
NABÍJANIE.....	9
ÚDRŽBA A ČISTENIE.....	10
BEZPEČNOSTNÉ POKYNY.....	11
VAROVANIA .....	12
UPOZORNENIA .....	12
ZÁRUKA.....	13
PRÁVNE VYHLÁSENIE .....	14
OTÁZKY A ODPOVEDE.....	15


# KONŠTRUKCIE

1



**Bočný pohľad**

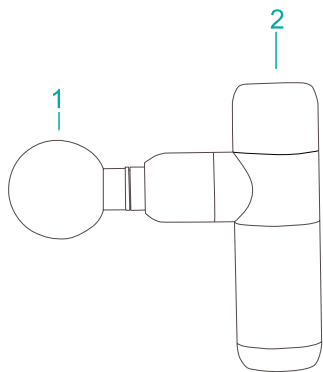

**Zadný pohľad**

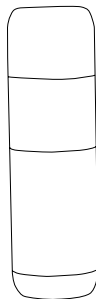


**Spodný pohľad**

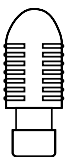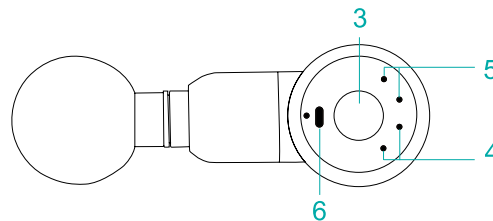


**Špirálová hlava**

Vhodná na pulzovanie hlbokých tkanív, ako sú meridiány, kĺby, dlane, chodidlá.

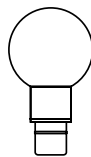


**Guľová hlava**

Vhodné pre veľké svalové skupiny, ako sú ruky, pás, boky, stehná a lýtka.

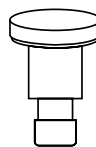

**Plochá hlava**

Vhodné na uvoľnenie a formovanie rôznych častí svalov.

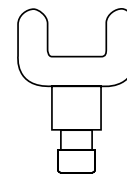


**Vidlicová hlava**

Vhodné na masáž krku, chrbtice a Achillovej šľachy.

## PARAMETRE

2

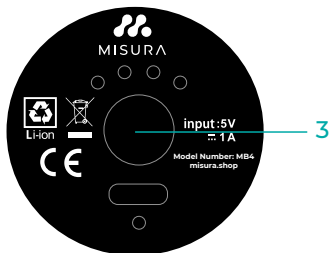

1. Odnímateľné, vymeniteľné hlavy. Odstránenie silným ťahom
2. Vysokorýchlostný bezkartáčový motor
3. Tlačidlo zapnutia/vypnutia
4. Indikátor stavu batérie (modrý)
5. LED indikátor úrovne frekvencie (modrý)
6. Port USB na nabíjanie – DV 5V/1A

Názov produktu	Masážny prístroj MB4
Batéria	Li-ion 2 000 mAh
Pracovný čas	3–4 hodiny
Čas nabíjania	4 hodiny
Otáčky	1200–2800 ot./min
Úrovne	4 rýchlosti
Impulzy/úder	6 mm
Hmotnosť	495g / 800g
Rozmery	14,5 × 9 × 4,5 cm

## FUNKCIE

3

Svaly môžu byť po cvičení stuhnuté a bolestivé a končatiny sa môžu cítiť ťažké a slabé. Príčina spočíva vo „fascii“ - fascia je mäkké tkanivo (blanitý obal svalov), ktoré obklopuje a spája svaly a šľachy. Intenzívne cvičenie, nedostatočné natiahovanie a uvoľnenie svalov alebo zlé držanie tela môže spôsobiť skrátenie alebo pretrhnutie a poškodenie fascií a svalov. Môže tiež znížiť pohyblivosť kĺbov a spôsobiť „oneskorený nástup svalovej bolesti“.

Produkt MISURA MB4 hĺbkovo uvoľňuje fascie, čím zmierňuje pocit napätia a bolesti. Masážny prístroj MISURA uvoľňuje hlboké svaly silnou vysokofrekvenčnou vibračnou stimuláciou, preniká do fascií, rýchlo odbúrava kyselinu mliečnu vznikajúcu po cvičení, uvoľňuje napäté a stuhnuté svalové tkanivo. Masírovaním uzlových bodov a svalov sa predchádza vzniku svalových zrástov, zmierňuje sa únava a bolesť a celkovo sa zmierňujú svalové ťažkosti.

Ručný masážny prístroj MISURA MB4 je pokročilé masážne zariadenie. Vykonáva hlbokú a silnú vibračnú stimuláciu, uvoľňuje fascie, odstraňuje stuhnutosť a napäté svaly, čo prináša nasledujúce výhody:

- Urýchľuje rast svalov.
- Posilňuje pružnosť svalov.
- Pomáha urýchliť regeneráciu svalov.
- Uvoľňuje a znižuje obsah kyseliny mliečnej v tele.
- Zlepšuje a rozširuje rozsah pohybu.
- Znižuje bolesť spojenú s poškodením mäkkých tkanív.
- Znižuje výskyt oneskoreného nástupu svalovej bolesti.
- Zlepšuje prietok krvi.



## VÝHODY

4


### Moderný čistý dizajn v tvare T

Tenká, inovatívna a ergonomická protišmyková rukoväť umožňuje pohodlné uchopenie a jednoduchú manipuláciu so zariadením.

Atraktívnosť výrobku podčiarkuje vysokokvalitný kovový dizajn, ktorý umocňujú čisté línie v tvare písmena T.

### Veľká sila priamo do hĺbky tela

Vďaka presnému vnútornému vyváženiu má MISURA MB4 výkon až 2800 otáčok za minútu pri veľmi nízkej spotrebe energie. Tento silný zdroj energie zasahuje svalové skupiny až do hĺbky 6 mm. Rýchlo rozpúšťa kyselinu mliečnu, ktorá vzniká pri fyzickej námahe, napína každú svalovú bunku a prináša úľavu hlboko do celého tela.

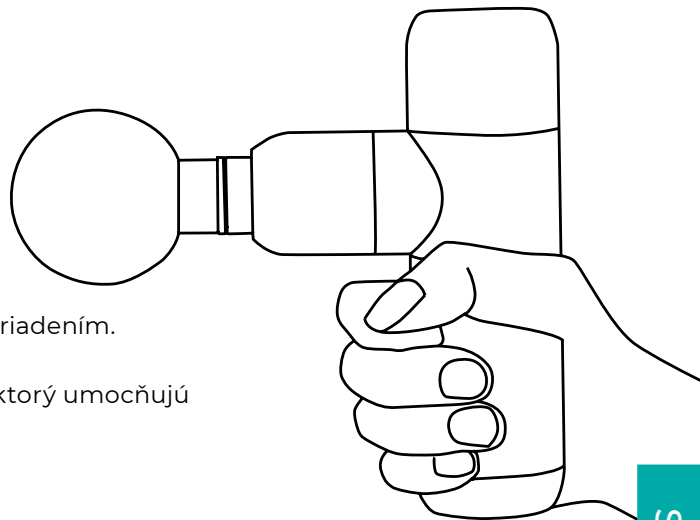

SK




## Štvorstupňová frekvenčná konverzia a technológia inteligentného snímača tlaku

Zariadenie je vedecky navrhnuté s ohľadom na špecifické potreby používateľa. Variabilná štvorstupňová frekvenčná konverzia a inteligentný vibračný režim snímania tlaku sa dokonale prispôbujú individuálnym potrebám používateľov. Či už ide o každodennú, upokojujúcu a relaxačnú masáž, alebo o profesionálnu starostlivosť, ktorá si vyžaduje hlbokú a intenzívnu masáž, vždy nájdete tú správnu amplitúdu.

## Tichý prevádzkový režim. Vychutnajte si chvíľu relaxu

Špičkový bezkartáčový motor je vybavený novou generáciou technológie redukcie hluku, ktorá reguluje hluk na úroveň iba 35 decibelov. To zaručuje tichú prevádzku všade tam, kde sa rozhodnete stroj používať. Či už v telocvični, šatni alebo napríklad v tichu kancelárie či domova. V tichu nechajte únavu opadnúť a doprajte svojmu telu a mysli uvoľnenie a pokojnú relaxáciu.

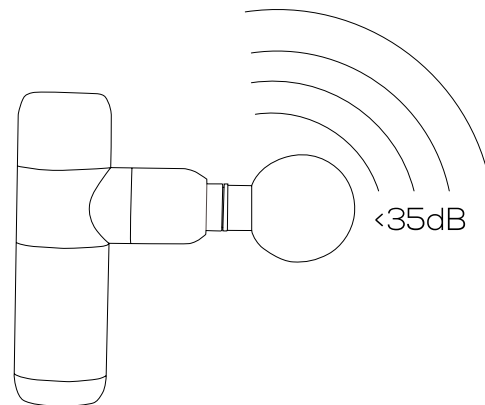

## Dlhšia výdrž batérie. Funkcie powerbanky pre váš mobilný telefón

Masážny prístroj MISURA MB4 je vybavený lítiovou batériou s kapacitou 2000 mAh na uchovávanie energie s výdržou až 4 hodiny. Úplné nabitie batérie trvá približne 3 hodiny. Vďaka jedinečnej konštrukčnej technológii dosahuje zariadenie vysoký výkon pri minimálnej spotrebe energie.

Masážny prístroj MISURA MB3 možno nabíjať pomocou bežného telefónneho adaptéra USB-C alebo adaptéra **DV 5V/1A** (nie je súčasťou dodávky). Okrem toho možno zariadenie používať ako powerbanku na nabíjanie mobilných telefónov (táto funkcia sa nevzťahuje na produkty Apple).


**VAROVANIE: Vždy používajte adaptér s maximálnym výstupným prúdom 1A!**

**V opačnom prípade môže dôjsť k zničeniu zariadenia.**

Vďaka tejto jedinečnej funkcii je MISURA MB4 ideálnym zariadením na cesty.

## Funkcia inteligentného vypnutia

Doba používania masážneho prístroja sa líši podľa jednotlivých častí tela. Aby sa zabránilo príliš dlhému času masáže jednej časti tela a možnému poškodeniu svalov a kostí, je masážny prístroj vybavený funkciou inteligentného vypnutia. Po 10 minútach nepretržitého používania sa automaticky zastaví. To chráni vaše telo a predĺžiť životnosť stroja.

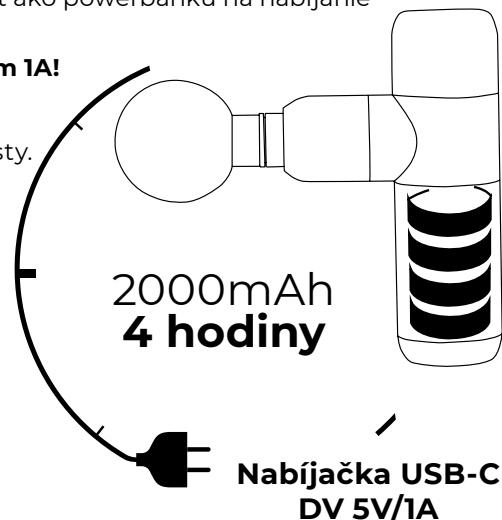

### Vhodné pre každého vďaka variabilnému nastaveniu

Naša MISURA MB4 je vhodná pri bolestiach chrbta, ramien a krku spôsobených dlhodobým sedením v kancelárii, nosením ťažkých predmetov a cestovanie na dlhé vzdialenosti. Je vhodný aj pre športovcov. Prístroj MISURA MB4 je vynikajúcim doplnkom starostlivosti o zdravie, na uvoľnenie stuhnutých svalov, relaxáciu a regeneráciu a formovanie postavy.

### Lahký, kompaktný a ideálny na cesty

Masážny prístroj MISURA MB4 váži iba 0,55 kg a je veľmi prenosný a napriek tomu si zachováva svoj výkon. Lahko sa zmestí do každej batohy, a tak môže byť vaším partnerom na cestách. Zážitok z masáže si tak môžete vychutnať kedykoľvek a kdekoľvek.

## PREPÍNATEĽNÁ ÚROVEŇ RÝCHLOSTI


Po zapnutí masážneho prístroja možno krátkym stlačením tlačidla zapnutia/vypnutia prepínať úroveň rýchlosti..

### SMART MODE (inteligentná technológia snímania tlaku)

1. stupeň rýchlosti s jedným svetelným indikátorom, štartovacia rýchlosť je 1 200 ot/min, masážna rýchlosť je 1 500 ot/min.
2. prevodový stupeň s dvoma kontrolkami, otáčky pri rozjazde sú 1 200 ot/min, masážne otáčky sú 2 200 ot/min.
3. prevodový stupeň s tromi kontrolkami, otáčky pri rozjazde sú 1 200 ot/min, masážne otáčky sú 2 800 ot/min.
4. prevodový stupeň so štyrmi kontrolkami, štartovacia rýchlosť je 1 200 ot/min, masážna rýchlosť sa reguluje podľa tlaku v rozsahu 1 500, 2 200 až 2 800 ot/min. S touto prevodovkou môžete využívať rýchlosť 1., 2. a 3. prevodového stupňa a nemusíte prepínať jeden po druhom, je to veľmi pohodlné.

Po cykle 1., 2., 3. a 4. prevodového stupňa preradíte na prevodový stupeň 0. V tomto čase je k dispozícii len funkcia napájania, vibrácie nie sú k dispozícii.

Krátkym stlačením prepnete prepínač a nastavenie frekvencie

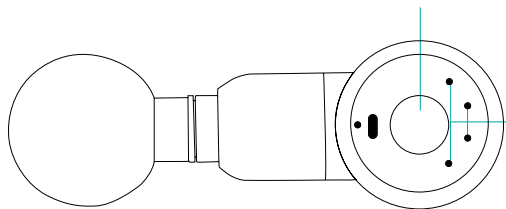


Indikátor batérie a štyri nastavenia rýchlosti

## NABÍJANIE

9

- Pred prvým použitím batériu úplne nabite približne na 4 hodiny.
- Pripojte DC adaptér (5V/1A) k nabíjacímu portu a pripojte kábel nabíjačky do zásuvky.
- Po pripojení adaptéra začne na zariadení blikať zelená kontrolka LED, ktorá signalizuje aktívne nabíjanie.
- Plné nabitie je indikované, keď zelená LED prestane blikať a začne svietiť trvalo.
- Batériu je možné kedykoľvek dobiť na ľubovoľnej úrovni nabitia.
- Neodporúča sa úplne vybiť batériu. Úplné vybitie batérie výrazne skraca jej životnosť.
- Vybíjanie batérie je signalizované rýchlejším blikaním zelenej LED počas prevádzky a skrátením času prevádzky z 10 minút na menej.
- Priemerná výdrž batérie je až 4 hodiny pri rýchlosti prvého stupňa. Pri používaní vyšších rýchlostí sa znižuje výdrž batérie.

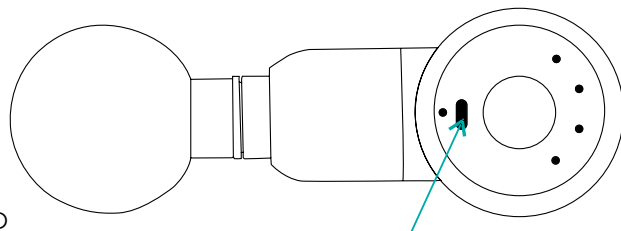

NABÍJANIE


### RADY

Zariadenie by malo byť plne nabité, aj keď sa nepoužíva. To pomáha predĺžiť životnosť batérie zariadenia. Batéria vydrží na plné nabitie približne 2 roky. Odporúčame však kontrolovať batériu každých šesť mesiacov a v prípade potreby ju dobiť do plnej kapacity.

## ÚDRŽBA A ČISTENIE

10

- Zariadenie vyčistíte mierne navlhčenou utierkou a potom ho osušte mäkkou handričkou.
- Skladujte na suchom, dobre vetranom a ľahko prístupnom mieste. Neukladajte na seba.
- Ak zariadenie nebudete používať dlhší čas, mali by ste ho každých šesť mesiacov rozbaľiť, skontrolovať a dobiť.
- Výrobok je vhodný na prepravu autom, vlakom, loďou a letecky.
- Výrobok by sa mal počas prepravy skladovať tak, aby nebol vystavený silným vibráciám, nárazom, prevráteniu, klesanie a nadmerná vlhkosť.

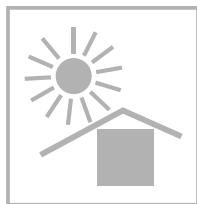

## BEZPEČNOSTNÉ POKYNY

11

Aby sa znížilo riziko úrazu elektrickým prúdom, požiaru alebo zranenia osôb, musí sa tento výrobok používať v súlade s nasledujúcimi pokynmi.

- Používajú len dospelí.
- Používajte len na suchom čistom povrchu tela alebo na oblečení jemným stláčaním a pohybom po tele približne 60 sekúnd v každej oblasti.
- Masážny prístroj používajte len na mäkké telesné tkanivo podľa potreby bez toho, aby ste spôsobili bolesť alebo nepohodlie.
- Nepoužívajte ho na hlavu ani na tvrdé alebo kostnaté časti tela.
- Používajte hlavice, ktoré majú najlepší požadovaný účinok na konkrétnu svalovú oblasť.
- Modriny sa môžu vyskytnúť bez ohľadu na nastavenie ovládania alebo použitý tlak. Často kontrolujte ošetrované oblasti a pri prvom náznaku bolesti alebo nepohodlia zariadenie okamžite zastavte.
- Prsty, vlasy alebo iné časti tela držte v dostatočnej vzdialenosti od hriadeľa a zadnej časti aplikátora, pretože by mohlo dôjsť k otláčeniu.
- Do vetracích otvorov masážneho prístroja nekladajte žiadne predmety.
- Neponárajte zariadenie do vody a nedovoľte, aby sa voda dostala do ventilačných otvorov masážneho zariadenia.
- Chráňte zariadenie pred pádom alebo nesprávnym použitím.
- Pred každým použitím zariadenie a batériu starostlivo skontrolujte. Do jednotlivých komponentov masážneho prístroja nijako nezasahujte ani ich nemeňte.
- Nikdy nenechávajte masážny prístroj bez dozoru, keď sa používa alebo nabíja.

## VAROVANIA

12

- Zariadenie neponárajte do vody.
- Chráňte pred kvapalinami a zdrojmi tepla.
- Chráňte vetracie otvory pred prachom a malými predmetmi.
- Neodstraňujte skrutky ani sa nepokúšajte zariadenie opravovať sami. Akýkoľvek zásah do konštrukcie výrobku bude mať za následok stratu záruky na tento výrobok.
- Nepoužívajte ho nepretržite dlhšie ako jednu hodinu.
- Pred ďalším použitím nechajte zariadenie odpočívať aspoň 30 minút.
- Po nabití alebo pred použitím odpojte nabíjačku od batérie zariadenia.
- Nezraňujte sa. Ak si nie ste istí vhodnosťou používania zariadenia, poraďte sa so svojim lekárom.
- Výrobok používajte len v súlade s návodom na použitie uvedeným v príručke k výrobku.

## UPOZORNENIA

12

**Bez predchádzajúceho súhlasu lekára nepoužívajte masážne prístroje ani žiadne vibračné zariadenia, ak sa vás týka niektorá z nasledujúcich možností:**  
Tehotenstvo, cukrovka s komplikáciami, ako je neuropatia alebo poškodenie sietnice, srdcová slabosť, nedávna operácia, epilepsia a migréna, hernia disku, spondylolistéza alebo spondylóza, nedávna výmena kíbu alebo vnútromaternicové teliesko, kovové čapy alebo platničky alebo akékoľvek obavy o vaše fyzické zdravie. Krehké osoby alebo deti by mali byť pri používaní vibračného zariadenia v sprievode dospelaj osoby. Tieto kontraindikácie neznamenujú, že nemôžete používať vibračné alebo cvičebné zariadenia, ale najprv sa poraďte s lekárom. Prebiehajúci výskum účinkov vibračného cvičenia na špecifické zdravotné poruchy pravdepodobne povedie k skráteniu zoznamu uvedených kontraindikácií. Praktické skúsenosti ukázali, že zaradenie vibračných cvičení do liečebného plánu sa odporúča vo viacerých prípadoch. Cvičenia sa musia vykonávať na základe odporúčania a s pomocou lekára alebo iného odborníka alebo fyzioterapeuta.



# ZÁRUKA

13

Záruka platí od okamihu zakúpenia. Ak výrobok zlyhá z dôvodu materiálových chýb alebo procesu navrhovania do 24 mesiacov, spoločnosť bezplatne opraví alebo vymení chybné diely, alebo nahradí novými výrobkami, s výnimkou nasledujúcich prípadov:

- nesprávne používanie alebo poškodenie zariadenia spôsobené prepravou.
- Neoprávnená demontáž alebo oprava tohto zariadenia.
- Nedodržanie návodu na použitie.
- Výrobok je poškodený v dôsledku neobvyklého prostredia skladovania alebo údržby zákazníkom
- Ak nie je predložený doklad o kúpe, spoločnosť si vyhradzuje právo odmietnuť záruku.

## PRÁVNE ZRIEKNUTIE SA ZODPOVEDNOSTI

14

Ak trpíte niektorým zo stavov uvedených v časti Upozornenia, pri používaní lieku MISURA MB4 sa vždy poradte so svojim lekárom.

Spoločnosť MISURA Store s.r.o. nie je licencovaným poskytovateľom zdravotnej starostlivosti a vyhlasuje, že nemá žiadne odborné znalosti v oblasti diagnostiky, vyšetrovania alebo liečby zdravotných ťažkostí akéhokoľvek druhu alebo určovania účinku konkrétneho cvičenia alebo terapie na akýkoľvek zdravotný stav. Pri účasti na akomkoľvek cvičení alebo terapii existuje možnosť fyzického zranenia. Ak sa zapojíte do takéhoto cvičenia alebo terapie, súhlasíte s tým, že tak robíte na vlastné riziko, dobrovoľne sa zúčastňujete na týchto aktivitách, a tým na seba preberáte všetko riziko úrazu. Týmto zároveň súhlasíte s tým, že sa vzdávate všetkých známych alebo neznámych nárokov voči spoločnosti MISURA Store s.r.o. vyplývajúcich z nedbanlivosti.

Musíte mať viac ako 18 rokov. Ak pocítite silnú bolesť alebo nepohodlie, okamžite prestaňte zariadenie používať. Každý cvičebný program vrátane tohto môže viesť k zraneniu. Pred začatím tohto alebo akéhokoľvek iného cvičebného alebo terapeutického programu sa poradte s lekárom. Výrobcovia, distribútori, dodávatelia a predajcovia sa zriekajú akejkoľvek zodpovednosti za akékoľvek straty v súvislosti s informáciami, ukázkami cvičení alebo pokynmi uvedenými v tomto dokumente.

Copyright 2021. MISURA Store Ltd. 24-mesačná obmedzená záruka. Platia zmluvné podmienky.

### Otázka 1: Ako masážny prístroj funguje?

**Odpoveď:** MISURA MB4 uvoľňuje fascie a stuhnuté a napäté svaly. Vďaka stimulácii hlbokých a silnými vibráciami uvoľňuje napäté mäkké tkanivá, podporuje krvný obeh a rýchlo rozpúšťa kyselinu mliečnu vznikajúcu po cvičení, čo výrazne skraca čas regenerácie svalov. Zároveň dokáže odstrániť bolesť, znížiť svalovú adhéziu, zmierniť zápal tkaniva, urýchliť hojenie rán a predchádzať športovým zraneniam.

### Otázka 2: Môžem vymeniť batériu? Ako správne používať batériu? Aká je výdrž batérie?

**Odpoveď:** Zariadenie používa vysoko kvalitné lítiové batérie 18650. Batéria je nabíjateľná, a preto ju nemožno vymeniť samostatne. Batériu nerobte ani nevymieňajte bez pomoci technika. Prevádzkový čas po úplnom nabití je až 4 hodiny. Ak chcete predĺžiť životnosť batérie, majte na pamäti nasledujúce informácie:

1. Pred prvým použitím batériu nabíjajte 4 hodiny, aby sa batéria úplne nabila.
2. Keď je batéria vybitá na 90 %, je potrebné ju dobiť.
3. Keď výrobok nepoužívate, úplne ho nabite.

V prípade pretrvávajúcich problémov s batériou sa obráťte na technickú podporu na adrese **[www.misura.shop](http://www.misura.shop)**.

### Otázka 3: Masážne prístroje na trhu vyzerajú podobne. Ako môžem porovnať sily, ktoré ovplyvňujú hlbšie stimuláciu? Aká je amplitúda? Aká je hĺbka amplitúdy?

**Odpoveď:** MISURA MB4 je vynikajúca pištoľ na hlbkovú masáž. Je vybavený otočným duálnym ložiskom, ktoré poskytuje silnú a ostrú silu. Vysokorýchlostné impulzy s rýchlosťou 2 800 otáčok za minútu dokážu preniknúť do svalových skupín až do hĺbky 6 mm a rýchlo odbúravajú kyselinu mliečnu vznikajúcu po cvičení, čím vám poskytnú príjemný zážitok priamo v hĺbke svalov.

#### **Otázka 4: Ako sa správne vkladá príslušenstvo do zariadenia? Aké sú odporúčania pre rôzne príslušenstvo?**

**Odpoveď:** Masážny prístroj MISURA MB4 obsahuje štyri profesionálne masážne hlavice, ktoré sa prispôbia každej časti tela. Jednotlivé masážne hlavice môžete používať podľa vlastných potrieb. Správny spôsob inštalácie masážnej hlavice: pri ťahaní/inštalácii hlavice ju mierne otáčajte, neťahajte/neinštalujte ju priamo. Konkrétne pokyny nájdete v našej používateľskej príručke.

#### **Otázka 5: Jaké možnosti rychlosti má masážní pistole? Jak správně zvolím rychlost?**

**Odpoveď:** Masážní přístroj MISURA MB4 má čtyři nastavitelné stupně rychlosti, které mohou dosáhnout rychlosti 1 200–2 800 ot./min. Intenzitu masáže si můžete upravit podle svých preferencí frekvence a točivého momentu, které poskytují úlevu hlubokých tkání svalů. Masáž by neměla být bolestivá, a proto volte frekvenci pulsů tak, aby vyhovovala Vaší aktuální potřebě.

#### **Otázka 6: Neznášam hlasné zvuky, aká je úroveň hluku/tlmenia tohto masážneho prístroja?**

**Odpoveď:** Masážny prístroj MISURA MB4 využíva bezkefkový motor vybavený novou generáciou technológie redukcie hluku do maximálnej hodnoty 35 decibelov. Ponorte svoje telo a myseľ do takmer úplného ticha a užite si pokojnú chvíľu relaxácie.

#### **Otázka 7: Má tento masážny prístroj funkciu časovania?**

**Odpoveď:** Masážny prístroj MISURA MB4 je vybavený časovou ochranou Smart Shutdown. Po desiatich minútach nepretržitého používania sa automaticky zastaví. Tým sa zabezpečí bezpečná prevádzka z hľadiska ochrany zdravia aj životnosti zariadenia.

**Otázka 8: Kedy môžem masážny prístroj používať?**

**Odpoveď:** Záleží na situácii. Masážny prístroj MISURA MB4 používajte pred cvičením na zahriatie a aktiváciu svalovej vitality. Používanie prístroja MISURA MB3 počas cvičenia môže uvoľniť napäté svaly. Po cvičení použite masážny prístroj MISURA MB4 na hĺbkovú masáž a relaxáciu, zbavte sa únavy a bolestivosti a rýchlo obnovte vitalitu.

**Otázka 10: Tento produkt po zakúpení nefunguje. Aké sú zásady vrátenia tovaru?****Ako môžem kontaktovať výrobcu kvôli záručnej oprave/výmene?**

**Odpoveď:** Ak výrobok zlyhá do 24 mesiacov od dátumu zakúpenia z dôvodu materiálových alebo konštrukčných chýb, vymeníme ho za nový výrobok alebo ho bezplatne opravíme.

Ak pre vás môžeme urobiť čokoľvek iné, neváhajte nás kontaktovať: [info@misura.shop](mailto:info@misura.shop)

