

R&D Bausch + Lomb.		ULOTKA PIL		BAUSCH + LOMB	
Nazwa produktu Product Name	Vividrin ectoin MDO		Kolor nadruku Colours		
			Black		
Kraj Country (ISO)	CZ; SI; SK		Nr wykrojnika Spec No	14842	
Opracowane przez Designed by	Berkan Engin berkan.engin@bausch.com		Kod Wytwórcy Manufacturer code	43154PB228/5-CZ+	
Nr korekty Proof No	2	Data Date	02-02-2024		Kod farmaceutyczny Pharmacode
Kod wersji Valeant version code	P1CZSISK06		Inny kod Other code	-	
Rozmiar czcionki Font size	minimum 8,5 pt		Wymiar ulotki PIL size	148 x 420 mm	
Krój czcionki Font used	Futura Font Family		Gramatura papieru Paper weight	- g/m²	
Komentarze Comments (Reason for the change)					
- PMR_BNL-24-0075-A - Technical change/SDU Symbol no Black colouring					
Akceptacja Techniczna Technical Approval					
<div style="border: 1px dashed black; padding: 10px; display: inline-block;"> <p>GENEHMIGT Von kluges , 14:57, 02.02.2024</p> </div>					
Akceptacja Działu ds. Rejestracji Regulatory Affairs Dept. Approval					
<div style="border: 1px solid black; padding: 10px; display: inline-block;"> <p>APPROVED By Jonas Sigl at 3:15 pm, Feb 02, 2024</p> </div>					

Přečtěte si prosím pozorně tyto pokyny – obsahují důležité informace o tom, jak tento přípravek používat. Máte-li jakékoli dotazy, zeptejte se prosím lékárníka, praktického lékaře, očního lékaře, nebo kontaktujte přímo nás.

BAUSCH + LOMB Vividrin® ectoin®

Složení:
Kyselina hyaluronová 2,4 mg/ml (jako hyaluronát sodný), Ectoin® 20 mg/ml, chlorid sodný, hydroxid sodný (pro úpravu pH) a voda na injekci

Určené použití:
Podpůrná léčba a prevence příznaků alergického zánětu spojivek, úleva podrážděných očí v důsledku zánětu a zklidňující zvlhčení oka.




Co je přípravek Vividrin® Ectoin®?
Přípravek **Vividrin® Ectoin®** je zdravotnický prostředek, který obsahuje Ectoin®, což je přírodní látka, která chrání buňky, zmírňuje zánět a stabilizuje membrány, a kyselinu hyaluronovou, přírodní látku, která zklidňuje oči díky vysoké schopnosti vázat vodu a stabilizujícím vlastnostem. Neobsahuje puřry.

Indikace k použití:
Přípravek **Vividrin® Ectoin®** je izotonický roztok pro oční kapky, který lze používat k léčbě a prevenci příznaků sezónní a celoroční alergické konjunktivitidy (zánětu spojivek) způsobené pyly, roztoči, zvířecí srstí nebo plísňemi atd. Účinně zmírňuje příznaky, jako jsou svědění, podráždění, zarudnutí nebo slzení očí, díky zvlhčení očí, přináší úlevu i u zánětem podrážděných očí. **Vividrin® Ectoin®** zmírňuje zánět spojivek v důsledku chemicko-fyzikálních podnětů nefarmakologickým působením.

Kdy použít Vividrin® Ectoin®?
Vividrin® Ectoin® stabilizuje přirozený slzný film dvěma mechanismy: kyselina hyaluronová má pozitivní vliv na vodnou fázi a Ectoin® posiluje lipidovou fázi. Tento duální mechanismus účinku chrání oko před škodlivými vlivy alergenů a dalších vnějších faktorů a podporuje proces regenerace podrážděných a citlivých spojivek. Přípravek **Vividrin® Ectoin®** je bez konzervačních látek a je vhodný pro uživatele kontaktních čoček i osoby s citlivými očima. **Jak často a jak dlouho Vividrin® Ectoin® používat?**
Podle potřeby kápněte 1–2 kapky přípravku Vividrin® Ectoin® do oka. Můžete jej používat denně, jak často chcete. Doba používání není omezena.

Jak přípravek Vividrin® Ectoin® používat?
Patentovaný mechanismus aplikační pumpičky přípravku Vividrin®

Ectoin® umožňuje, že je přípravek bez konzervantů. **Obecná poznámka:** Před použitím si vždy umyjte ruce. Vyhněte se kontaktu špičky lahvičky s prsty nebo očima; předejete tím případné kontaminaci roztoku nebo poranění očí.

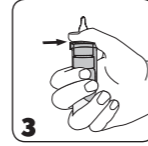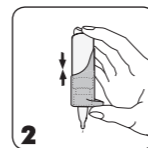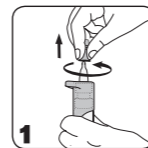

Poté zavřete oko a pomalu jím pod víčkem pohybujte, aby se kapka optimálně rozprostřela po povrchu oka.

5. Ihned po použití setřete případné zbytky kapek z lahvičky a nasadte průsvitný bílý ochranný uzávěr zpět na špičku lahvičky.

Kvůli designu lahvičky zůstává v lahvičce malé množství roztoku. Avšak uvedený objem lahvičky může být plně využit.

Kdy nepoužívat přípravek Vividrin® Ectoin®

Tento přípravek nepoužívejte, pokud jste precitlivělý/á na kteroukoli z jeho složek.

Důležité informace o používání přípravku Vividrin® Ectoin®

- Lokální alergické reakce byly hlášeny velmi vzácně. V takových případech se nesmí v používání přípravku pokračovat.
- Pokud budou potíže nebo podráždění přetrvávat, přestaňte přípravek používat a poraďte se s lékařem.
- Tento přípravek může po aplikaci způsobit přechodně rozmazané vidění, což může mít nepříznivý vliv na řízení dopravních prostředků nebo obsluhu strojů.
- Nedotýkejte se povrchu oka špičkou lahvičky; předejete tím možnému poranění povrchu oka a kontaminaci roztoku.
- Nedotýkejte se špičky lahvičky prsty; zabráníte tím případné kontaminaci roztoku.
- Po otevření lahvičky nesdílejte s žádnými jinými osobami.
- Neopatrně zacházení s prostředkem v rozporu s návodem k použití může vést k tomu, že prostředek vyklouzne z ruky, což může způsobit poranění oka
- Před použitím dalšího očního přípravku počkejte přibližně 15 minut.
- Tento zdravotnický prostředek zlikvidujte 6 měsíců po otevření
- Nepoužívejte po uplynutí data použitelnosti

Pokud jsou obal nebo lahvička poškozeny, prostředek nepoužívejte

- Přípravek **Vividrin® Ectoin®** obsahuje malé plastové části, které by malé děti mohly spolknout. Nebezpečí udušení. Proto **Vividrin® Ectoin®** uchovávejte mimo dosah dětí.
- Přípravek **Vividrin® Ectoin®** je vhodný pro použití s měkkými i tvrdými kontaktními čočkami
- Tento prostředek mohou používat laici bez specifického proškolení
- Na základě současných poznatků mohou přípravek používat těhotné ženy, kojící ženy i děti
- Pokud má vaše dítě suché oči, poraďte se před použitím očních kapek s lékařem

Jak přípravek Vividrin® Ectoin® uchovávat:

Uchovávejte při teplotě 2 až 25 °C
Konstrukce lahvičky umožňuje používat přípravek **Vividrin® Ectoin®** 6 měsíců po otevření.

Likvidace:

Přípravek musí být zlikvidován v souladu s místními nařízeními. Každá závažná nežádoucí příhoda, která se vyskytne v souvislosti s tímto přípravkem, musí být hlášena výrobcí a příslušným úřadům.

Datum vydání:
Vividrin® Ectoin® „J228EU-04“; datum vnitrostátní revize (2023-09)

Ectoin® je ochranná známka společnosti Bitop AG. Všechny ostatní ®/™ jsou ochranné známky společnosti Bausch & Lomb Incorporated nebo jejich dceřiných společností
© Bausch & Lomb Incorporated nebo její dceřiné společnosti

Pozorně si přečtajte tento návod na použití – obsahuje důležité informace o používání tohto produktu. Ak máte nejaké otázky, opýtajte sa svojho lekárnik, lekára, odborníka na očné starostlivosť alebo nás kontaktujte.

BAUSCH + LOMB

Vividrin® ectoin®

Složenie:
2,4 mg/ml kyseliny hyaluronovej (ako hyaluronát sodný), 20 mg/ml Ectoin®, chlorid sodný, hydroxid sodný (na úpravu pH) a voda na injekciu

Určené použitie:
Podporná liečba a prevencia príznakov alergického zápalu spojiviek, úľava podráždených očí v dôsledku zápalu a upokojujúce zvlhčenie oka

Čo je Vividrin® Ectoin®?
Vividrin® Ectoin® je zdravotnícka pomôcka, ktorá obsahuje Ectoin®, prírodnú molekulu, ktorá chráni bunky, potláča zápal a stabilizuje membrány, a kyselinu hyaluronovú, prírodnú molekulu, ktorá vďaka vysokej schopnosti viazať vodu a stabilizačným vlastnostiam upokojuje oko. Neobsahuje puřry.

Indikácia na použitie:
Vividrin® Ectoin® je izotonický roztok, ktorý sa môže používať na liečbu a prevenciu prejavov sezónnej a celoročnej alergickej konjunktivitidy (zápal spojiviek) spôsobenej napr. peľom, roztočmi, zvieracou srstou, alebo plesňami. Účinne potlačuje svrbenie, podráždenie a začervenanie alebo slzenie očí; zvlhčenie očí bude mať za následok úľavu očí aj u zápalom podráždených očí. **Vividrin® Ectoin®** zmiernuje zápal spojiviek v dôsledku chemicko-fyzikálnych podnetov nefarmakologickým pôsobením.





Kedy je vhodné používať Vividrin® Ectoin®?
Vividrin® Ectoin® stabilizuje prirodzený slzný film dvoma spôsobmi: kyselina hyaluronová má pozitívny vplyv na vodnú fázu a Ectoin® posiluje lipidovú fázu. Tento dvojitý účinok chráni oko pred škodlivým vplyvom alergenov a iných vonkajších faktorov a podporuje regeneráciu podráždených a citlivých spojiviek.

Vividrin® Ectoin® neobsahuje konzervačné látky a je vhodný pre nositeľov kontaktných šošoviek a osôb s citlivými očami.

Ako často používať Vividrin® Ectoin®?
Podľa potreby kvapnite do oka 1 – 2 kapky **Vividrin® Ectoin®**. Môžete ho používať každý deň a tak často, ako chcete. Doba používania nie je obmedzená.

Ako používať Vividrin® Ectoin®?
Patentovaný mechanismus pumpy **Vividrin® Ectoin®** umožňuje, aby roztok na kvapky bol bez konzervantov.

Všeobecná poznámka: Pred každým použitím si umyte ruky. Zabráňte kontaktu špičky fľaštičky s prstami alebo očami, aby ste predišli akejkoľvek nožnej kontaminácii roztoku alebo poraneniu očí.

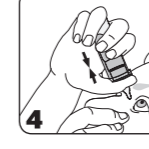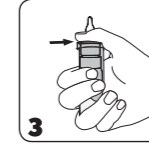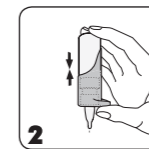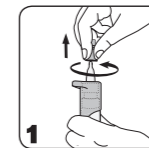

1. Pred každým použitím otočením odstráňte prievitný biely ochranný uzávěr od špičky fľaštičky.

2. Upozornenie! Pred prvým použitím a ak sa fľaštička dlhší čas nepoužíva:
Nasmerujte fľaštičku špičkou nadol a opakovane stlačíte mechanizmus pumpy, kým sa neuvolní kvapka.

3. Držte fľaštičku tak, ako je uvedená: Položte palec na ergonomickú opierku palca a spodnú časť obopnite prstami. Dva prsty by mali byť umiestnené na dne fľaštičky.

4. Nasmerujte fľaštičku špičkou nadol. Hlavu mierne zakloňte dozadu. Prstom voľnej ruky jemne stiahnite spodné viečko nadol. Fľaštičku držte vo zvislej polohe nad očami, ako je znázornené. Jemne stlačte mechanizmus pumpy, aby ste aplikovali jednu kvapku do oka.

Po kvapnutí zatvorte oko a žmurknite, aby sa kvapka optimálne roznesla po povrchu oka.

5. Ihned po použití straste z fľaštičky prípadné zvyšky kvapiek a na špičku fľaštičky znova nasadte prievitný biely ochranný uzávěr.
Vďaka dizajnu fľaštičky zostáva vo fľaštičke malé množstvo roztoku. Z fľaštičky je však možné nadávkovať celý uvedený objem.


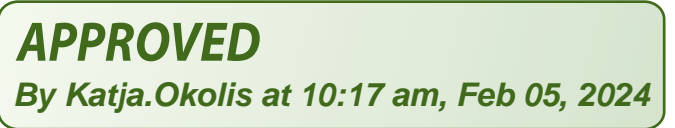
Kedy nepoužívať Vividrin® Ectoin®

Nepoužívajte túto zdravotnícku pomôcku, pokiaľ ste alergický na ktorúkoľvek zložku prípravku.

Dôležité informácie o používaní Vividrin® Ectoin®

- Veľmi zriedkavo boli hlásené lokálne alergické reakcie. V takýchto prípadoch sa má liečba prerušiť.
- Ak pociťujete pretrvávajúce nepohodlie alebo podráždenie, prestaňte zdravotnícku pomôcku používať a poraďte sa so svojím lekárom.
- Tento produkt môže po nakvapnutí spôsobiť dočasné rozmazané videnie, čo môže mať negatívny vplyv na vedenie vozidiel alebo obsluhu strojov.
- Nedotýkajte sa povrchu oka špičkou fľaštičky, aby ste predišli možnému poraneniu povrchu oka alebo kontaminácii roztoku.
- Nedotýkajte sa špičky fľaštičky prstami, aby ste zabránili nožnej kontaminácii roztoku.
- Po otvorení sa o fľaštičku nedel'te s nikým iným.
- Neopatrné zaobchádzanie s výrobkom v rozpore s návodom na použitie môže viesť k vyklznutiu výrobku z ruky, čo môže spôsobiť poranenie očí.
- Pred použitím iného očného prípravku počkajte približne 15 minút.
- Zdravotnícku pomôcku po otvorení zlikvidujte po 6 mesiacoch.
- Nepoužívajte po dátume spotreby.
- Ak sú obal alebo fľaštička poškodené, zdravotnícku pomôcku nepoužívajte.
- Vividrin® Ectoin®** obsahuje malé plastové časti (ochranný uzávěr), ktoré by malé deti mohli prehltnúť. Nebezpečenstvo udušenia. Preto Vividrin® Ectoin® uchovávať mimo dohľadu a dosahu detí.
- Vividrin® Ectoin®** je vhodný na použitie s mäkkými a tvrdými kontaktnými šošovkami.
- Túto zdravotnícku pomôcku môžu používať aj neodborníci bez špeciálneho výškolenia.
- Na základe súčasných poznatkov môžu výrobok používať tehotné, dojčiacie ženy a deti.
- Ak má vaše dieťa pocit suchých očí, pred použitím očných kvapiek



R&D Bausch + Lomb.		ULOTKA PIL		BAUSCH + LOMB	
Nazwa produktu Product Name		Vividrin ectoin MDO		Kolor nadruku Colours	
		Black			
Kraj Country (ISO)	CZ; SI; SK	Nr wykrojnika Spec No	14842		
Opracowane przez Designed by	Berkan Engin berkan.engin@bausch.com	Kod Wytwórcy Manufacturer code	43154PB228/5-CZ+		
Nr korekty Proof No	2	Data Date	02-02-2024	Kod farmaceutyczny Pharmacode	98
Kod wersji Valeant version code	P1CZSISK06	Inny kod Other code	-		
Rozmiar czcionki Font size	minimum 8,5 pt	Wymiar ulotki PIL size	148 x 420 mm		
Krój czcionki Font used	Futura Font Family	Gramatura papieru Paper weight	- g/m²		
Komentarze Comments (Reason for the change)					
- PMR_BNL-24-0075-A - Technical change/SDU Symbol no Black colouring					
Akceptacja Techniczna Technical Approval					
 <p>GENEHMIGT Von Franka Bessem , 10:53, 05.02.2024</p>					
Akceptacja Działu ds. Rejestracji Regulatory Affairs Dept. Approval					
 <p>APPROVED By Jonas Sigl at 3:15 pm, Feb 02, 2024</p>					
 <p>APPROVED By Katja.Okolis at 10:17 am, Feb 05, 2024</p>					

sa poraďte s lekárom.
Ako Vividrin® Ectoin® uchovávať:
 Skladujte pri teplote 2 – 25 °C.
 Po prvom otvorení sa môže používať 6 mesiacov.

Likvidácia:
 Produkt sa musí zlikvidovať v súlade s miestnymi predpismi.
 Každý vážny incident, ku ktorému dôjde v súvislosti s týmto produktom, je nutné nahlásiť výrobcovi a príslušnému orgánu.
Dátum vydania:
 Vividrin® Ectoin®, »1228EU-04«; dátum národnej revízie (2023-09)
 Ectoin® je ochranná známka spoločnosti Bitop AG. Všetky ostatné ®/™ sú ochranné známky spoločnosti Bausch & Lomb Incorporated alebo jej pridružených spoločností.
 © 2023 Bausch & Lomb Incorporated alebo jej pridružené spoločnosti

Ta navodila za uporabo natančno preberite, saj vsebujejo pomembne informacije o načinu uporabe tega izdelka. Če imate kakršna koli vprašanja, se posvetujte s farmacevtom, zdravnikom, okulistom ali z nami.

BAUSCH + LOMB

Vividrin® ectoin®

Sestava:
 0,24 % hialuronske kislina (v obliki natrijevega hialuronata), 2 % molekule Ectoin®, natrijev klorid, natrijev hidroksid (za uravnavanje pH) in voda za injekcije
Namenska uporaba:
 Podporno zdravljenje in preprečevanje simptomov alergijskega konjunktivitisa, lajšanje vnetne razdraženosti oči in pomirjujoče vloženie oči

Kaj je Vividrin® ectoin®?
Vividrin® ectoin® je medicinski pripomoček, ki vsebuje Ectoin®, naravno zaščitno molekulo za celice, ki zmanjšuje vnetje in stabilizira membrano, ter hialuronsko kislino, naravno molekulo, ki zaradi svoje visoke zmožnosti vezave vode in stabilizacijskih lastnosti deluje blagodejno na oko. Ne vsebuje pufov.
 Napredna formulacija zagotavlja zelo visoko toleranco, saj ne vsebuje konzervansov.

Indikacija za uporabo:
Vividrin® ectoin® je izotonična raztopina kapljic za oči, ki se lahko uporablja za zdravljenje in preprečevanje simptomov sezonskega in celoletnega alergijskega konjunktivitisa, ki ga povzročajo cvetni


prah, pršice, živalska dlaka ali plesen itd. Simptomi, kot so srbeče, razdražene, rdeče ali solzne oči, se bodo učinkovito zmanjšali; pomirjujoče vloženie bo prineslo olajšanje, tudi pri vnetih in razdraženih očeh. Vividrin® ectoin® preko nefarmakološkega delovanja zmanjšuje vnetje veznice, ki ga povzročajo kemično-fizikalni dražilni dejavniki.

Kdaj uporabiti Vividrin® ectoin®?
Vividrin® ectoin® stabilizira naravni solzni film na dva načina: hialuronska kislina pozitivno vpliva na vodno plast, Ectoin® pa krepi lipidno plast. Ta dvojni način delovanja ščiti oko pred škodljivimi vplivi alergenov in drugih zunanjih dejavnikov ter podpira proces regeneracije razdražene in občutljive očesne veznice. Izdelek **Vividrin® ectoin®** ne vsebuje konzervansov in je primeren za uporabnike kontaktnih leč ter osebe z občutljivimi očmi.


Kako pogosto in kako dolgo uporabljati Vividrin® ectoin®?
 Po potrebi kapnite v oko 1–2 kapljici **Vividrin® ectoin®**. Kapljice lahko uporabljate vsak dan in tako pogosto, kot želite. Trajanje uporabe ni omejeno.

Kako uporabljati Vividrin® ectoin®?
 Patentirani črpalni mehanizem kapljic za oko **Vividrin® ectoin®** omogoča, da raztopina kapljic ne vsebuje konzervansov.


Splošna opomba: Pred vsako uporabo si umijte roke. Konice vsebnika se ne dotikajte s prsti ali očmi, saj lahko to povzroči onesaženje raztopine ali poškodbo oči.

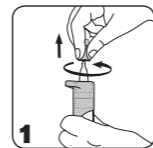


1. Pred vsako uporabo z vrha vsebnika odvijte in odstranite prozoren bel zaščitni pokrovček.

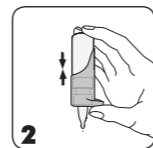

2. Pozor! Pred prvo uporabo in če vsebnika nekaj časa niste uporabljali: Vsebnik usmerite s konico navzdol in večkrat pritisnite na črpalni mehanizem, dokler ne izteče kapljica.

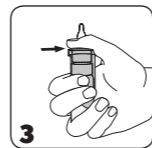

3. Držite vsebnik, kot je prikazano: Palec namestite na ergonomsko oporo za palec in s prsti objemite spodnji del. Dva prsta morate položiti na dno vsebnika.

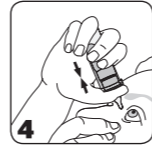

4. Vsebnik usmerite s konico navzdol. Glavo nagnite rahlo nazaj. Spodnjo veko s prstom proste roke nežno povlecite navzdol. Vsebnik držite navpično nad očesom, kot je prikazano na sliki. Nežno pritisnite na črpalni mehanizem, da kapnete eno kapljico v oko.

Nato zaprite oko in pomežiknite, da se kapljica optimalno porazdeli po površini očesa.

5. Takoj po uporabi z vsebnika otesite morebitne ostanke kapljic in na konico vsebnika znova namestite prozorni beli zaščitni pokrovček.

Zaradi zasnovane vsebnika ostane v njem manjša količina raztopine. Kljub temu bo navedena količina polnjenja vsebnika v celoti porabljena.

Kdaj ne smete uporabiti izdelka Vividrin® ectoin®?

Tega izdelka ne uporabljajte, če ste preobčutljivi na katero od sestavin.

Pomembne informacije o uporabi Vividrin® ectoin®

- Zelo redko so poročali o lokalnih preobčutljivostnih reakcijah. V takšnih primerih je treba zdravljenje prekiniti.
- Če nelagodje ali draženje vztraja, prenehajte uporabljati izdelek in se posvetujte z zdravnikom.
- Ta izdelek lahko po vkapanju povzročičasno zamegljen vid, kar lahko negativno vpliva na upravljanje vozil ali strojev.
- S konico vsebnika se ne dotikajte očesne površine, da preprečite morebitne poškodbe očesne površine ali kontaminacijo raztopine.
- Konice vsebnika se ne dotikajte s prsti, da preprečite morebitno kontaminacijo raztopine.
- Po odprtju vsebnik uporabljajte zgolj vi.
- Nepazljivo ravnanje z izdelkom, ki je v nasprotju z navodili za uporabo, lahko povzroči zdrs izdelka iz rok in posledično poškodbo očesa.
- Po uporabi z vsebnika otesite morebitne ostanke kapljic.
- Pred uporabo drugega izdelka za oko počakajte približno

- 15 minut.
- Medicinski pripomoček zavržite 6 mesecev po odprtju.
- Ne uporabljajte po izteku roka uporabnosti.
- Ne uporabljajte, če je poškodovana embalaža ali vsebnik.
- Vividrin® ectoin®** vsebuje majhne plastične dele, ki bi jih lahko pogoltnili majhni otroci. Nevarnost zadušitve. Zato je treba **Vividrin® ectoin®** hraniti izven dosega otrok.
- Vividrin® ectoin®** je primeren za uporabo z mehкими in trdimi kontaktnimi lečami.
- Ta pripomoček lahko uporabljajo laiki, ki niso posebej usposobljeni.
- Na podlagi doseganjih spoznanj se izdelek lahko uporablja pri nosečnicah, doječih materah in otrocih.
- Če ima vaš otrok suhe oči, se pred uporabo izdelka za vloženie oči posvetujte z zdravnikom.
- Ta pripomoček lahko uporabljajo laiki, ki niso posebej usposobljeni.

Kako shranjevati Vividrin® ectoin®:
 Hranite pri temperaturi od 2 °C do 25 °C.
 Zasnova vsebnika omogoča uporabo izdelka **Vividrin® ectoin®** 6 mesecev po odprtju.

Odstranjevanje:
 Izdelek je treba odstraniti v skladu z lokalnimi predpisi. Vsak resni zaplet, ki se zgodi v zvezi z izdelkom, je treba prijaviti proizvajalcu in pristojnemu organu.

Vysvětlení symbolů

Vysvetlenie symbolov

Razlaga uporabljenih simbolov

Sterilizovano za použití aseptických metod a baleno v systému jednoduché sterilní bariéry
 Sterilizované pomocou technik aseptického spracovania a balené v systéme jednoduchej sterilnej bariéry
 Sterilizirano z aseptičnimi tehnikami obdelave in pakirano v enojni sterilni pregradni sistem

Mezení teploty
 Teplotný limit
 Temperatura omejitvev



Nepoužívejte, pokud jsou obal nebo lahvička poškozeny
 Ak sú obal alebo fľaštička poškodené, výrobok nepoužívajte
 Ne uporabljajte, če je embalaža ali vsebnik poškodovan/-a.



Po prvém otvorení lze používat 6 měsíců
 Po prvom otvorení sa môže používať 6 mesiacov
 Uporabno 6 mesecev po prvem odprtju



Prostudujte si návod k použití
 Prečítajte si návod na použitie
 Glejte navodila za uporabo



Datum použitelnosti
 Dátum spotreby
 Rok uporabnosti



Kód šarže
 Kód šarže
 Številka serije



Zdravotnícký prostředek
 Zdravotnícka pomôcka
 Medicinski pripomoček

Jedinečný identifikátor prostředku
 GTIN (01) identifikace prostředku
 EXP (17) datum použitelnosti (formát: rmmdd)
 LOT (10) číslo šarže



Jedinečná identifikácia pomôcky
 GTIN (01) identifikácia pomôcky
 EXP (17) dátum spotreby (formát: rmmdd)
 LOT (10) číslo šarže

Edinstveni identifikator pripomočka
 GTIN (01) identifikacija pripomočka
 EXP (17) rok uporabnosti (oblika: llmdd)
 LOT (10) številka serije



Upozornění (prostudujte si návod k použití obsahující důležité varovné informace)
 Upozornenie (dôležité varovné informácie nájdete v návode na použitie)
 Pozor (za pomembne previdnostne informacije glejte navodilo za uporabo)



Datum výroby
 Dátum výroby
 Datum proizvodnje



Výrobce
 Dr. Gerhard Mann chem.-pharm. Fabrik GmbH
 Brunsbütteler Damm 165/173
 13581 Berlin
 Německo



Výrobca
 Dr. Gerhard Mann chem.-pharm. Fabrik GmbH
 Brunsbütteler Damm 165/173
 13581 Berlín
 Nemecko



Proizvajalec
 Dr. Gerhard Mann chem.-pharm. Fabrik GmbH
 Brunsbütteler Damm 165/173
 13581 Berlin
 Nemčija



Posouzení shody podle evropského nařízení o zdravotnických prostředcích
 Označení CE s číslem notifikovaného orgánu
 Európske posúdenie zhody zdravotníckych pomôcok
 Označenie CE s číslom notifikovaného orgánu
 Evropska ocena skladnosti medicinskih pripomočkov
 Oznaka CE in številka priglašenega organa

Vividrin® ectoin®, »1228EU-04«; 2023-09

Ectoin® je blagovna znamka družbe Bitop AG. Vse ostale ®/™ so blagovne znamke družbe Bausch & Lomb Incorporated ali njenih pridruženih družb.
 © 2023 Bausch & Lomb Incorporated ali njene pridružene družbe